



## Kit Instrutor 2

### Description

#### Conteúdo detalhado do produto do kit do instrutor PRESTAN

- (2) Manequim adulto profissional com feedback de RCP (pele clara)
- (2) Manequim infantil profissional com feedback de RCP (pele clara)
- (2) AED UltraTrainer® (Inglês/Espanhol)
- (2) Acessório Feminino (1 Pele Média e 1 Pele Escura)
- (2) Camisa de treinamento de manequim de RCP para adultos
- (2) Camisa de treinamento de manequim de RCP infantil
- (50) Protetor facial/bolsa pulmonar para adultos
- (50) Protetor facial infantil/bolsa pulmonar
- (2) Máscara de válvula de bolsa para adulto
- (2) Máscara com válvula de bolsa infantil
- (4) Almofada de Joelho PRESTAN
- (1) Bolsa de transporte com rodas de rolo e alça telescópica

#### Monitor de taxa de RCP de manequim profissional PRESTAN

Todos os manequins profissionais PRESTAN estão disponíveis com um revolucionário monitor de taxa de RCP que permite feedback instantâneo para instrutores e alunos. O feedback visual do

monitor de taxa de RCP dá aos alunos uma sensação real de entregar 100-120 compressões por minuto. As luzes sinalizam continuamente a progressão da taxa, confirmando que as compressões estão dentro da faixa de 100-120 cpm recomendada pelas Diretrizes da Indústria. A luz amarela piscará se o limite superior de 120 cpm for excedido, alertando os alunos para diminuir a velocidade. Os instrutores podem monitorar vários alunos de forma rápida e fácil.


Além do Monitor de Taxa de RCP visual, os alunos também ouvirão um som de clique quando o peito for empurrado até a profundidade apropriada de 2,0 a 2,4 polegadas, permitindo que eles sintam a verdadeira força necessária para aplicar compressões torácicas reais.

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Sleep Mode/No Power</b>                                          |  |
| <b>1<sup>st</sup> Full Compression</b><br>(Wake mode/LED Test Mode) |  |
| <b>CPM* &lt; 60</b>                                                 |  |
| <b>CPM* 60 – 79</b>                                                 |  |
| <b>CPM* 80 – 99</b>                                                 |  |
| <b>CPM* 100 - 120</b>                                               |  |
| <b>CPM* &gt; 120</b>                                                |  |
| <b>Compressions Stopped</b>                                         |  |

do separadamente para atualizar qualquer

\*CPM = Compressions per minute

= Flashing

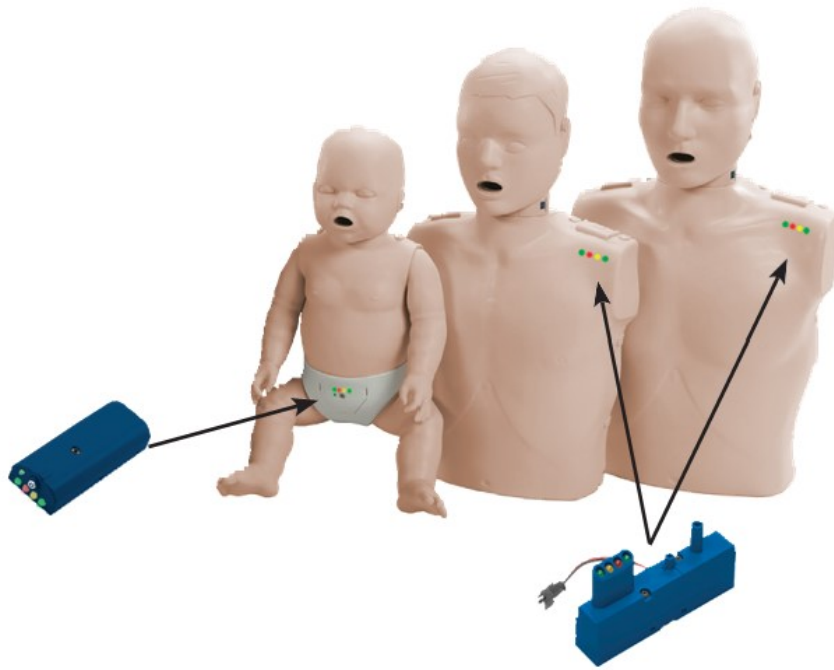

**Date Created**  
outubro 28, 2024

Prática Brasil